

USER GUIDE.

OrCam **Read.**

 ORCAM | orcaml.com |    

OrCam **Read.**

A SMART PEN THAT READS TEXT FROM ANY SURFACE.

List of Languages.

01. ENGLISH / 13. French / 25. German
/ 37. Danish 47. Spanish / 59. Finnish
/ 69. Japanese / 81. Dutch / 91. Norwegian
/ 101. swedish

Get Familiar. ----- 02

Get Started. ----- 03

- Charging.
- Turn on OrCam Read.
- Enter Suspend mode.
- Exit Suspend mode.
- Turn off OrCam Read.
- Setting the Volume.
- Vocal Commands.
- Audio Settings Menu Options.
- Bluetooth Connectivity.
- Mobile App.
- Connect to WiFi and Software Updates.




OrCam Read Features.----- 08

- Reading with the Trigger Button.
- Reading Navigation.
- Laser Pointer Modes.
- Set Zone and Time & Telling the Time and Date.
- Smart Reading.

Terms and Conditions. ----- 09

Safety and Warnings. ----- 10

Get Familiar.

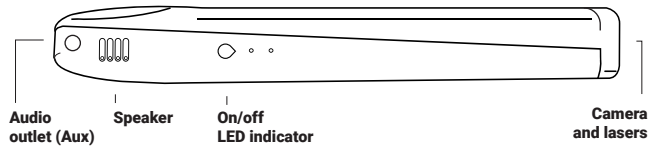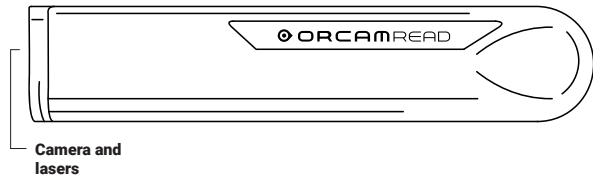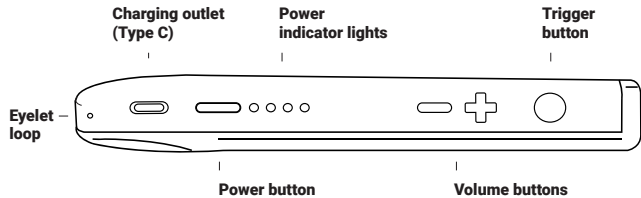

WHAT'S IN THE BOX:

- OrCam Read device
- User Guide
- Charging cable
- Charger box
- Wired earphones
- Cleaning cloth
- Lanyard

Get Started.

Online Resources.

You can find more details and information on the OrCam User Area. Visit our website at www.orcam.com/user-area and enjoy a detailed User Manual, tips, advice, and troubleshooting support.

Charging.

Before turning on the device for the first time, OrCam recommends charging the device for at least three hours. For all subsequent charges, OrCam Read fully charges in 90-120 minutes.

To charge OrCam Read:

1. Insert the cable into the type C inlet of OrCam Read.
2. Plug the USB end into the charger and then into an electrical socket.

Turn on or off Your OrCam Read.

- To turn on OrCam Read, press the power button for 2 seconds. When the device wakes up, you will hear, "OrCam Read Version [xx] is ready. Battery is [xx] percent charged".
- To enter the Suspend mode, press the power button once. You will hear a beep and, "Suspending. Press again to shut down", and then, "Suspended" as the device enters Suspend mode.
- To exit the Suspend mode, either press the power button or trigger button once. You will hear a beep and, "Waking up. Battery is [xx] percent charged".

- To turn off OrCam Read, press the power button once. You will hear a beep and, "Suspending. Press again to shut down". Press the power button again. You will hear a beep and, "Shutting down, please wait". As the device shuts down, you will hear, "Power off. Bye bye".

Setting the Volume.

The volume is set either using a vocal command or manually.

To increase the volume:

- Rapidly press the trigger button twice and say after the long beep, "Volume up".
- Press the plus ("+") volume button.

To decrease the volume:

- Rapidly press the trigger button twice and say after the long beep, "Volume down".
- Press the minus ("-") volume button.

Vocal Commands.

OrCam vocal commands can be used to easily control your OrCam Read, change settings, and receive information.

To use them:

1. Rapidly press the trigger button twice. You will hear a long beep.
2. Say the vocal command. You will then hear a chime.
3. OrCam Read will then tell you the information, change the setting, or ask you for more information in order to change the setting. To hear the list of vocal commands, say one of the following commands:

“Help Tell”

- OrCam Read will list all of the available commands that begin with “Tell”.
- These commands will help you receive general information (such

as the time or date) or information about the device (such as the software version or device serial number).

“Help Settings”

- OrCam Read will list all of the available commands that will help you modify your device’s settings.

“Help Smart Reading”

- OrCam Read will list all of the available commands for the Smart Reading feature.

Audio Settings Menu Options.

Customize your OrCam Read’s settings via the audio settings menu. There are two options for entering the audio settings menu:

- Rapidly press the trigger button twice and say after the long beep, “Enter the user menu”.
- Press and hold down the power button, press any of the volume buttons, and then release the power button. Once you are in the audio settings menu, pressing the trigger button once confirms the selected option; pressing either of the volume buttons browses through the options. Rapidly pressing the trigger button twice either makes the device go back to the main menu or exits the audio settings menu.

Complete List of Settings Options and Commands.

For the complete list of settings options, OrCam Please commands, and vocal commands, visit the online User Manual on the OrCam website’s User Area.

Bluetooth Connectivity.

Use Bluetooth to connect your OrCam Read to an external speaker or earphones.

1. On the speaker or the earphones:

A. Press the Bluetooth pairing button. You will receive an audio response from the speaker or earphones.

2. On your OrCam Read:

A. Do one of the following options:

- Rapidly press the trigger button twice and say after the long beep, "Connect to the Bluetooth audio device".

- Enter the audio settings menu. Go to Connectivity Settings Menu, then to Bluetooth Settings Menu.

B. Select "To connect to a Bluetooth audio device, press the trigger button; for other settings, press the volume buttons". OrCam Read will list all available Bluetooth devices.

C. Press the volume buttons to scroll through the Bluetooth

device options. Press the trigger button to select the device to which you want to connect.

D. On some Bluetooth speakers or earphones you will hear a "connected" announcement.

Note: When connected to a Bluetooth speaker or earphones, the volume level is controlled by the speaker's or earphones' volume buttons only, not by the OrCam Read plus or minus volume buttons.

Mobile App.

The OrCam Read app allows you to customize your OrCam Read's settings, control reading navigation, and find your device if you misplace it. The app is currently available only to iPhone and iPad users.

1. Search and download the OrCam Read app in the App store of your iPhone.

2. Turn on your iPhone's Bluetooth mode.

3. Follow the onscreen instructions while pairing your device.

Connect to WiFi and Software Updates.

Connecting your OrCam Read to a WiFi network ensures that your device will install the latest software updates throughout the warranty period. The device must also be connected to the charger throughout the downloading process in order to receive the software updates. Please note that OrCam Read only supports 2.4 Ghz WiFi, not 5 Ghz WiFi.

To connect to your WiFi network:

1. On your computer or smartphone:

A. Go to www.orcam.com/wifiset.

B. Follow the instructions on the screen to set your WiFi network.

C. A QR code will appear on the screen.

2. On your OrCam Read:

A. Connect OrCam Read to the charger.

B. Hold OrCam Read in front of the screen (computer screen about 12-16 in [30-40 cm]; smartphone screen about 6-8 in [15-20 cm]) in order to scan the QR code.

C. Read the QR code either using a vocal command or manually.
- Rapidly press the trigger button twice and say after the long beep, "Read the QR code".

- Point OrCam Read at the OrCam Please command and the QR code on the screen. Press the trigger button.

D. OrCam Read will chime and make several beeps as it scans the QR code and connects to the WiFi network. It will announce when it is connected.

Note: To check the status of your OrCam Read's connectivity to the internet, rapidly press the trigger button twice and say after the long beep, "Check the internet connectivity".

OrCam Read Features.

Reading with the Trigger Button.

1. Hold OrCam Read steady, directly facing the text at a distance of about 6-14 inches (15-35 cm) away from the text. Make sure that the long side of the device with all of the buttons is facing upward.

2. There are two ways to read with the trigger button.

- Press the trigger button once to take a picture of all text that is present.

- To read more specific text, use the laser pointers.

A. Press and hold down the trigger button, which will activate the laser indicator and a border laser frame or mouse laser pointer will be projected onto the text.

B. Adjust the border laser frame or mouse laser pointer in order to capture the desired text.

C. Let go of the trigger button. You will then hear a camera shutter sound as OrCam Read takes a picture of the text.

3. OrCam Read will make several beeps as it processes the text. It will then begin reading the text and chime when finished reading.

Note: If your finger is not released before 5 seconds transpire, the camera will not activate.

Reading Navigation.

- To pause or resume reading, press the trigger button twice.
- To skip to the next sentence, press the plus (“+”) volume button once.
- To go back to the previous sentence, press the minus (“-”) volume button once.
- To stop reading, press the trigger button once.
- When OrCam Read is finished reading, it will make a chime sound.

Laser Pointer Modes.

You can switch the laser pointer mode by pressing the plus and minus volume buttons at the same time.

There are two laser pointer modes:

- “Border” for reading framed text.
- “Mouse” to start reading at a specific location.

Note: OrCam Read captures the selected text within 5 seconds of pressing and holding the trigger button. If your finger is not released before 5 seconds transpire, the camera will not activate

Set Zone and Time & Telling the Time and Date.

- 1.** To set the internal clock, go to the Time Set page on the website: www.orcam.com/timeset.
- 2.** Press the trigger button to read the “OrCam Please Set Zone and Time” command on the screen.
- 3.** There are two ways to hear the current time:
 - Rapidly press the trigger button twice and say after the long beep, “Tell the time”.

- Use the mouse laser pointer to read the following command:

OrCam Please Tell Time

- 4.** There are two ways to hear the day of the week and the date:
 - Rapidly press the trigger button twice and say after the long beep, “Tell the date”.
 - Use the mouse laser pointer to read the following command:
OrCam Please Tell Date

- 5.** After a few seconds, OrCam Read will tell you the current time and/or date.

Smart Reading.

This feature enables you to find specific information in any document.

- 1.** Hold the document in front of you with the camera directly facing the text, just as when reading any text with OrCam Read.
- 2.** Rapidly press the trigger button twice and say after the long beep, "Smart Reading".
- 3.** Hold still until you hear the camera shutter sound.
- 4.** Shortly after, the device will announce, "Ready". It is now always listening. There is no need to rapidly press the trigger button twice before every vocal command.
- 5.** For a full list of available Smart Reading vocal commands,

either say, "Help", or visit the online User Manual on the OrCam website's User Area.

- 6.** If you wish to say a new command while the device is reading, press the trigger button once and the device will return to "Always Listening" mode.
- 7.** To exit this feature, either say, "Exit", or press and hold down the trigger button for 5 seconds and then release.

Terms and Conditions.

Your use of your OrCam device (the "Product") and the mobile app is subject to the Terms and Conditions found at orc.com/terms-and-conditions. Your agreement to these Terms and Conditions is a condition to your use of the Product.

Please read the User Guide in full, including the important Safety Instructions, before using your OrCam device. Do not use your OrCam device until you have received in-person or online training by an authorized OrCam Trainer™ or OrCam Training Program.

OrCam can take no responsibility if the Product was used other than in accordance with the instructions in the User Guide. Products should not be relied upon in circumstances that are potentially life- or health-threatening or that could lead to financial loss. OrCam devices should especially never be relied upon to drive vehicles or operate heavy machinery of any kind. OrCam shall not be responsible in the event that Products are used in such situations.

OrCam may receive information from third parties (i.e. Barcodes of Grocery Products in selected countries). OrCam received Barcode information from Barcodes of Grocery Products in Australia and New Zealand from GS1 Australia. OrCam accepts no responsibility for the accuracy of the information obtained from third parties.

Privacy.

OrCam thinks highly of your privacy and we are committed to protecting and safeguarding our clients' and users' personal information. Please read our Privacy Policy found at <https://www.orcam.com/privacy-policy/>, which describes how we process personal data regarding our clients and users in connection with services provided by us, our website, and the OrCam Read mobile application (the "Services" and the "App", respectively); the types of personal data we collect and process; to what purposes we use and process your personal data; how your personal data is protected; and with whom your personal data may be shared.

It is important for us to enable you to understand our privacy policy and your rights in connection with the personal data we hold about you. You should also be aware that we use cookies and similar technologies to collect and save information when you visit our website, available at www.orcam.com, to ensure that we give you the best possible experience. To learn more about the use of such technologies, please see our Cookie Policy at <https://www.orcam.com/en/cookies-policy/>.

If you feel that a concern you have in connection with your privacy has not been met by the Privacy Statement, please contact us at: privacy@orc.com and let us know.

If you choose to download the App or use, interact with, register, or provide data to us in connection with the Services, you explicitly agree to the use of such data in accordance with this Privacy Statement. You may not use the Services or submit any data to us if you do not agree to any of the terms hereunder. This Privacy Statement shall not be construed in any manner to derogate from our Terms of Conditions or any other agreement made by and between OrCam and you.

Warranty.

Customer acknowledges that, other than as explicitly stated herein, OrCam does not make any representations or warranties to Customer regarding the Product, its functions or any images it produces.

The OrCam end-user limited product warranty (the "Limited Warranty") covers the owner of an OrCam product against defects in material or workmanship at the time of its original purchase, for a subsequent period of one (1) year, and for any additional applicable legal warranty period. Original proof of purchase/delivery is required from the owner in order to obtain this coverage.

OrCam will repair or replace, at its discretion, any product that is determined by OrCam to be covered under this Limited Warranty. OrCam will not be responsible for conditions arising as a result of intentional damage or misuse of the product. The owner is responsible for the costs of shipping the product to the location specified by OrCam.

This Limited Warranty is the sole and exclusive warranty applicable to OrCam products. No third party has the authority to make any representation, warranty, or agreement on behalf of OrCam with respect to OrCam products. No warranty of any kind or nature is made by OrCam beyond those expressly stated herein.

In no event shall OrCam be liable for any special, collateral, indirect, punitive, incidental, consequential, or exemplary damages in connection with or arising out of the use of the product. In no event shall OrCam's liability exceed the price paid for the product.

Without limiting any provisions limiting liability under this agreement, the limited warranty set forth herein will not apply, and the owner will reimburse OrCam for any costs and expenses incurred in the event that:

- (i) the product has been used other than in accordance with the product documentation and terms of use or other written operating instructions provided by OrCam
- (ii) the product has been subject to tampering, misuse, negligence, or accident
- (iii) the product or parts identification labels have been removed or the product has been otherwise altered
- (iv) the product has been opened, modified, repaired, serviced, maintained, or altered by someone other than an authorized OrCam representative

(v) the product has been combined with software, hardware, or other equipment not supplied by OrCam or not approved in writing by an authorized OrCam representative

(vi) the product has been intentionally damaged or exposed to water, heat, or high voltage

(vii) the product has been used by a person who has not completed training by an authorized OrCam Trainer™

Any parts replaced pursuant to this warranty will be under warranty for the remaining time of the original warranty period or for ninety (90) days from the date of repair, whichever is longer.

To register your device for warranty, please visit the warranty registration website: <https://discover.orcam.com/warranty>.

If you believe that your product needs warranty support, contact support@orcaml.com. You will be responsible for shipping costs. However, if it is determined that the warranty request is valid, OrCam will pay the total cost of shipping the repaired or replaced product.

ORCAM DISCLAIMS ANY AND ALL WARRANTIES, WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT OF THIRD-PARTY RIGHTS, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. ORCAM DOES NOT WARRANT THAT THE PRODUCT WILL BE ERROR FREE OR "BUG" FREE, WILL OPERATE WITHOUT INTERRUPTION, THAT ANY IMAGES OR SOUNDS PRODUCED BY THE PRODUCT WILL BE ACCURATE OR THAT THE OPERATION OF THE PRODUCT WILL BE SECURE AND HEREBY DISCLAIMS ANY AND ALL LIABILITY ON ACCOUNT THEREOF. THIS SECTION SHALL BE ENFORCEABLE TO THE FULLEST EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW.

Refund Policy.

You can return your undamaged device for a refund within the period required by local law or as agreed between you and OrCam at the time of purchase. Training fees are non-refundable. Please contact your local representative or OrCam Support to initiate a return process.

When you return the OrCam device, please follow OrCam Support instructions carefully. The device must be in the same condition that you received it and undamaged in any way. Your refund and how it is issued may differ based on how the device was purchased, its condition, and how long you've had the device.

OrCam will process your return only after the carrier has received your device and delivered to OrCam. It usually takes up to three weeks for OrCam to receive (for international shipping involving local customs it may take longer) and process your return. Once OrCam issues your refund, it may

take additional time for your funds to be made available in your account by your financial institution. For credit card payments, it may take 5 to 10 business days.

If you have any questions, please feel free to contact the OrCam Support team.

FCC Compliance.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician.
- This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Warning.

Modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user authority to operate the equipment under FCC Rules.

NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

Waste Electrical and Electronic
Equipment Directive Compliant
Contact OrCam for proper disposal.

Restriction of Hazardous
Substances Directive Compliant
(materials and components)

FCC ID:
2AAWI-READ

CE Compliant

Refer to User Instruction
Guide and Manual

Safety and Warnings.

Before using the OrCam device, read these precautions carefully to avoid dangerous situations and to ensure ideal performance of your device. Handle your OrCam device with care. It can be damaged if dropped, burned, punctured, or crushed. Do not open the outer casing of the device.

The OrCam device is designed to work in ambient temperatures between 32°F and 104°F (0°C and 40°C) and in normal conditions (Relative Humidity of 10% to 90% RH and Atmospheric Pressure of up to 2000m above sea level (700hPa)). The device can be damaged if used outside of this range. Store and transport in a cool, dry place (32°F to 104°F (0°C to 40°C) and Relative Humidity of 5% to 90% and atmospheric pressure of 700hPa to 1060hPa)). The OrCam device is water resistant but not waterproof. This means the device can withstand light rain or drizzle for short periods of time, although it is not recommended. Do not use the OrCam device in heavy rain, at the beach or swimming pool, or in or near a bathtub or shower. Do not submerge the OrCam device in any liquid. The OrCam device meets the standards of IP Code: IP22.

Should you have a problem operating the OrCam device, if the case or lens is cracked, or if you believe there is something wrong with the device, please contact support and do not attempt to repair it by yourself. Only qualified OrCam personnel may repair or service your device. Unauthorized repairs may void your warranty.

Do not attempt to replace the battery; you may damage it, which could cause overheating and even injury. The battery is designed to last for two years of average use (one charging cycle per day on average) after which it may need to be replaced. Use only the charger supplied with your OrCam device. Using another charger may void your warranty and could cause severe injury.

Do not force a connector into a port or apply excessive pressure to a button. This may cause damage that is not covered under the warranty. If a connector does not insert easily, check for obstructions in the port and verify that you have the correct connector for that port. Do not combine with software, hardware, or other equipment not supplied by OrCam. Exposing the device to magnetic fields may damage the unit or erase your data.

When using the OrCam device or charging the battery, it is normal for the device to get warm. If the unit becomes excessively hot, leaks, or gives off a burning smell, turn the device off immediately and contact OrCam Support.

If you have specific questions about use alongside an internal pacemaker and/or defibrillator, please consult your medical professional. Do not use the OrCam device to read medication labeling.

Cleaning.

Clean your device if you feel it is dirty or transferred between users. Never touch the camera lens with your finger. Clean the lens only with the supplied microfiber cloth and eyeglass cleaning fluid. Do not use any abrasive materials. Do not expose the device to chemicals, such as household cleaners, aerosol sprays, solvents, alcohol, or ammonia. If you experience an allergic reaction to any of the elements of the OrCam device, contact a medical professional.

Max output of laser radiation : 0.371 mW
Emitted wavelength : 635 nm
Name of the standard : IEC 60825-1



Lista de idiomas.

01. inglés / 13. francés / 25. alemán / 37. danés

47. ESPAÑOL / 59. finlandés / 69. japonés /

81. holandés / 91. noruego / 101. sueco

Familiarícese. ----- 02

Comencemos. ----- 03

- Cargando.
- Encienda el OrCam Read.
- Entrar en el modo de suspensión.
- Salir del modo de suspensión.
- Apague el OrCam Read.
- Configuración del volumen.
- Comandos vocales.
- Opciones del menú de configuración de audio.
- Conectividad Bluetooth.
- Aplicación móvil.
- Conéctese a WiFi y a las actualizaciones de software.




Características de OrCam Read. --- 08

- Leer con el botón de activación.
- Navegación de lectura.
- Modos de puntero láser.
- Configurar la zona y la hora, y decir la hora y la fecha.
- Lectura Interactiva.

Términos y condiciones. ----- 09

Seguridad y advertencias. ----- 10

Familiarícese.

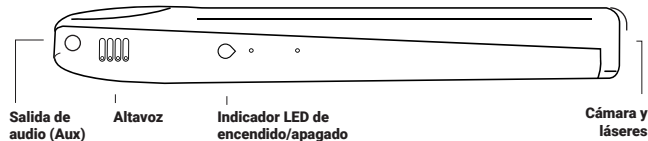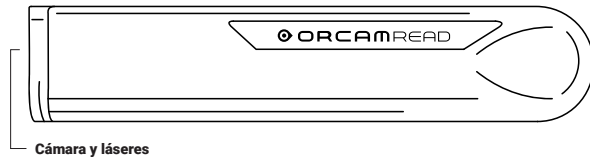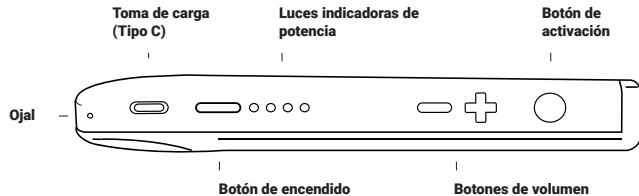

CONTENIDO DE LA CAJA:

- Dispositivo OrCam Read
- Manual del usuario
- Cable del cargador
- Caja de carga
- Auriculares con cable
- Trapo de limpieza
- Cordel

Comencemos.

ES

Recursos en línea.

Puede encontrar más detalles e información en el área de usuario de OrCam. Visite nuestro sitio web en www.orcam.com/user-area y disfrute de un detallado Manual de usuario, consejos, asesoramiento y soporte para la resolución de problemas.

Cargando.

Antes de encender el dispositivo por primera vez, OrCam recomienda cargar el dispositivo durante al menos tres horas. En todas las cargas subsiguientes, OrCam Read se carga completamente en 90-120 minutos. Para cargar OrCam Read:

1. Inserte el cable en la entrada tipo C de la OrCam Read.
2. Enchufe el extremo USB en el cargador y luego en una toma de corriente.

Para encender o apagar OrCam Read.

- Para encender la OrCam Read, pulse el botón de encendido durante 2 segundos. Cuando el dispositivo se despierte, oirá, «OrCam Read Versión [xx] está listo. La carga de la batería es del [xx] por ciento».
- Para entrar en el modo de suspensión, pulse el botón de encendido una vez. Escucharán un pitido y el mensaje: «Suspendiendo. Pulse de nuevo para apagar» y luego «Suspendido», cuando el dispositivo entre en el modo de suspensión.
- Para salir del modo de suspensión, pulse el botón de encendido o el botón de activación una vez. Escuchará un pitido y, «Activando. La carga de la batería es del [xx] por ciento».

- Para apagar la OrCam Read, pulse el botón de encendido una vez. Escucharán un pitido y el mensaje: «Suspendiendo. Pulse de nuevo para apagar». Vuelva a pulsar el botón de encendido. Escuchará un bip y, «Apagado, por favor espere». Mientras el dispositivo se apaga, escuchará «Apagando. Adiós».

Configuración del volumen.

El volumen se ajusta con un comando vocal o manualmente.

Para aumentar el volumen:

- Pulse rápidamente el botón de activación dos veces y diga después del pitido largo, «Sube el volumen».
- Pulse el botón de volumen más («+»).

Para disminuir el volumen:

- Pulse rápidamente el botón de activación dos veces y diga después del largo pitido, «Baja el volumen».
- Pulse el botón de volumen menos («-»).

Comandos vocales.

Los comandos de voz de OrCam pueden utilizarse para controlar con facilidad el dispositivo OrCam Read, cambiar la configuración o recibir información.

Para usarlos, haga lo siguiente:

1. Pulse rápidamente el botón de activación dos veces. Oirá un pitido largo.
2. Diga el comando vocal. Oirá un timbre.
3. Luego, OrCam Read le dará la información, cambiará la configuración o le solicitará más información para cambiar la configuración.

Para escuchar la lista de comandos vocales, diga uno de los siguientes comandos:

«Ayuda con comandos de diga»

- OrCam Read enumerará todos los comandos disponibles que empiezan con «Diga».

- Estos comandos le ayudarán a recibir información general (como la hora o la fecha) o información sobre el dispositivo (como la versión del software o el número de serie del dispositivo).

«Ayuda con configuraciones»

- OrCam Read enumerará todos los comandos disponibles que le ayudarán a modificar la configuración de su dispositivo.

«Ayuda con Lectura Interactiva»

- OrCam Read enumerará todos los comandos disponibles para la función de Lectura Interactiva.

Opciones del menú de configuración de audio.

Para personalizar la configuración de OrCam Read, vaya al menú de configuración de audio. Hay dos opciones para entrar en el menú de configuración de audio:

- Pulse rápidamente el botón de activación dos veces y diga después del pitido largo, «Entre al menú de usuario».
- Mantenga pulsado el botón de encendido, pulse cualquiera de los botones de volumen y suelte el botón de encendido. Una vez que esté en el menú de ajustes de audio, pulsar el botón de activación una vez confirma la opción seleccionada; al pulsar cualquiera de los botones de volumen se recorren las opciones. Al pulsar rápidamente dos veces el botón de activación, el dispositivo vuelve al menú principal o sale del menú de ajustes de audio.

Lista completa de opciones y comandos de configuración.

Para ver la lista completa de opciones de configuración, comandos de OrCam Por favor y comandos vocales, visite el Manual de Usuario en línea en el Área de usuario del sitio web de OrCam.

Conectividad Bluetooth.

Use el Bluetooth para conectar su dispositivo OrCam Read a un altavoz externo, auriculares o audífonos.

1. En el altavoz o en los auriculares:
 - A. Pulse el botón de emparejamiento de Bluetooth. Recibirá una respuesta de audio del altavoz o de los auriculares.
2. En su OrCam Read:
 - A. Haga una de las siguientes opciones:
 - Pulse rápidamente el botón de activación dos veces y diga después del pitido largo, «Conectar con el dispositivo de audio Bluetooth».
 - Entre en el menú de configuración de audio. Vaya al menú de configuración de conectividad y, luego, a la configuración de Bluetooth.
 - B. Seleccione «Para conectar con un dispositivo de audio por Bluetooth, pulse el botón de activación, para otras configuraciones, pulse los botones de volumen». OrCam

Read mostrará una lista de todos los dispositivos Bluetooth disponibles.

- C. Pulse los botones de volumen para desplazarse por las opciones del dispositivo Bluetooth. Pulse el botón de activación para seleccionar el dispositivo al que desea conectarse.
- D. En algunos altavoces o auriculares Bluetooth oirá un anuncio de «conectado».

Nota: Cuando está conectado a un altavoz/auricular Bluetooth, el nivel de volumen se controla a través de los botones de volumen del altavoz/auricular, no deslizando el dedo hacia arriba/abajo en la opción de volumen del OrCam Read.

Aplicación móvil.

La aplicación OrCam Read te permite personalizar la configuración de su OrCam Read, controlar la navegación de lectura y encontrar su dispositivo si lo pierde. La aplicación está actualmente disponible solo para los usuarios de iPhone y iPad.

1. Busque y descargue la aplicación OrCam Read en la App store de su iPhone.
2. Active el modo Bluetooth de su iPhone.
3. Siga las instrucciones en pantalla mientras empareja su dispositivo.

Conéctese a WiFi y a las actualizaciones de software.

La conexión de su OrCam Read a una red WiFi garantiza que su dispositivo instalará las últimas actualizaciones de software durante el período de garantía. El dispositivo también debe estar conectado al cargador durante todo el proceso de descarga para poder recibir las actualizaciones del software. Tenga en cuenta que OrCam Read solo admite WiFi de 2,4 Ghz, no WiFi de 5 Ghz. Para conectar a su red WiFi:

1. En su ordenador o smartphone:
 - A. Vaya a www.orcam.com/wifiset.
 - B. Para definir la red WiFi, siga las instrucciones en pantalla.
 - C. En la pantalla aparecerá un código QR.

2. En su OrCam Read:

- A. Conecte el OrCam Read al cargador.
- B. Sostenga la OrCam Read frente a la pantalla (pantalla de ordenador de unas 12-16 pulgadas en [30-40 cm]; pantalla de smartphone de unas 6-8 pulgadas [15-20 cm]) para escanear el código QR.
- C. Lea el código QR con un comando vocal o manualmente.
 - Pulse rápidamente el botón de activación dos veces y diga después del pitido largo, «Lee el código QR».
 - Apunte a OrCam Read en el comando OrCam Por favor y el código QR en la pantalla. Pulse el botón de activación.
- D. OrCam Read hará sonar un timbre y emitirá varios pitidos a medida que escanea el código QR y se conecta a la red WiFi. Al conectarse, notificará de ello.

Nota: Para comprobar el estado de la conectividad de su OrCam Read a Internet, pulse dos veces rápidamente el botón de activación y diga después del pitido largo, «Compruebe la conectividad a internet».

Características de OrCam Read.

Leer con el botón de activación.

1. Mantenga el OrCam Read estable, directamente frente al texto a una distancia de unas 6-14 pulgadas (15-35 cm) del texto. Asegúrese de que el lado largo del dispositivo con todos los botones esté hacia arriba.
2. Hay dos maneras de leer con el botón de activación.
 - Pulse el botón de activación una vez para tomar una foto de todo el texto presente.
 - Para leer un texto más específico, use los punteros láser.

- A. Mantenga pulsado el botón de activación, lo que activará el indicador de láser y un marco de láser de borde o un puntero de láser de ratón se proyectará en el texto.
 - B. Ajuste el marco láser del borde o el puntero láser del ratón para capturar el texto deseado.
 - C. Suelte el botón de activación. A continuación oirá el sonido del obturador de la cámara mientras OrCam Read toma una foto del texto.
3. A medida que procesa el texto, OrCam Read emite varios pitidos. Luego comienza a leer el texto y, al finalizar, se oye un timbre.
- Nota:** Si no suelta el dedo antes de que transcurran 5 segundos, la cámara no se activará.

Navegación de lectura.

- Para pausar o reanudar la lectura, pulse el botón de activación dos veces.
- Para saltar a la siguiente frase, pulse el botón de volumen más («+») una vez.
- Para volver a la frase anterior, pulse el botón de volumen menos («-») una vez.
- Para dejar de leer, pulse el botón de activación una vez.
- Cuando OrCam Read termine de leer, sonará un timbre.

Modos de puntero láser.

Puede cambiar el modo de puntero láser pulsando los botones de volumen más y menos al mismo tiempo.

Hay dos modos de puntero láser:

- «Frontera» para leer el texto enmarcado.
- «Ratón» para empezar a leer en un lugar específico.

Nota: OrCam Read captura el texto seleccionado dentro de los 5 segundos de haber presionado el botón de activación. Si no suelta el dedo antes de que transcurran 5 segundos, la cámara no se activará.

Configurar la zona y la hora, y decir la hora y la fecha.

1. Para configurar el reloj interno, vaya a la página de configuración de fecha y hora en el sitio web: www.orcam.com/timeset.
2. Pulse el botón de activación para leer el comando «OrCam por favor establezca la zona horaria y la hora» en la pantalla.
3. Hay dos maneras de escuchar la hora actual:
 - Pulse rápidamente el botón de activación dos veces y di después del largo pitido, «Diga la hora».

- Use el puntero láser del ratón para leer el siguiente comando:

OrCam por favor diga la hora

4. Hay dos maneras de escuchar el día de la semana y la fecha:
 - Pulse rápidamente el botón de activación dos veces y di después del largo pitido, «Diga la fecha».
 - Use el puntero láser del ratón para leer el siguiente comando:
5. Al cabo de unos segundos, OrCam Read le dirá la hora y/o la fecha actuales.

Lectura Interactiva.

Esta función le permite encontrar información específica en cualquier documento.

1. Sostenga el documento frente a usted con la cámara directamente frente al texto, como cuando lee cualquier texto con OrCam Read.
2. Pulse rápidamente el botón de activación dos veces y diga después del pitido largo, «Lectura Interactiva».
3. Manténgalo hasta que escuche el sonido del obturador de la cámara.
4. Poco después, el dispositivo anunciará: «Listo». Ahora siempre está escuchando. No es necesario presionar rápidamente el botón de activación dos veces antes de cada comando vocal.

5. Para una lista completa de los comandos vocales de Lectura Interactiva disponibles, diga «Ayuda», o visite el Manual de usuario en línea en el área de usuario del sitio web de OrCam.
6. Si desea decir un nuevo comando mientras el dispositivo está leyendo, pulse el botón de activación una vez y el dispositivo volverá al modo «Siempre a la escucha».
7. Para salir de esta función, diga «Salir», o mantenga pulsado el botón de activación durante 5 segundos y luego suéltelo.

Términos y condiciones.

Su uso del dispositivo OrCam (el «Producto») y la aplicación móvil está sujeto a los términos y condiciones que figuran en [orcam.com/terms-and-conditions](https://www.orcam.com/terms-and-conditions). Para poder utilizar el producto, es imprescindible aceptar estos términos y condiciones.

Antes de usar su dispositivo OrCam, lea el Manual del usuario en su totalidad, incluidas las instrucciones de seguridad. No use el dispositivo OrCam hasta haber recibido una formación en línea o en persona, impartida por un instructor OrCam Trainer™ autorizado, o mediante el programa de formación de OrCam.

OrCam no asume ninguna responsabilidad si el producto no se utiliza de acuerdo con las instrucciones incluidas en el manual del usuario. No se debe depender de los productos en circunstancias que impliquen amenazas potenciales para la vida o la salud, o que pudieran conducir a pérdidas financieras. En particular, jamás se debe confiar en los dispositivos OrCam para conducir vehículos o trabajar con maquinaria pesada de cualquier tipo. OrCam no será responsable en caso de que los productos se utilicen en este tipo de situaciones.

OrCam puede recibir información de terceros (por ejemplo, códigos de barras de productos alimenticios en determinados países). GS1 Australia le proporcionó a OrCam información de códigos de barras correspondientes a productos de almacén de Australia y Nueva Zelanda. OrCam no acepta responsabilidad por la exactitud de la información obtenida de terceros.

Privacidad.

OrCam valora mucho su privacidad y estamos comprometidos a proteger y salvaguardar la información personal de nuestros clientes y usuarios. Lea nuestra Política de privacidad que se encuentra en <https://www.orcam.com/privacy-policy/>, que describe cómo procesamos los datos personales de nuestros clientes y usuarios en relación con los servicios proporcionados por nosotros, nuestro sitio web y el dispositivo móvil OrCam Read, la aplicación (los "Servicios" y la "Aplicación", respectivamente); los tipos de datos personales que recopilamos y procesamos, con qué fines usamos y procesamos sus datos personales, cómo se protegen sus datos personales y con quién se pueden compartir sus datos personales.

Es importante para nosotros permitirle comprender nuestra política de privacidad y sus derechos en relación con los datos personales que tenemos sobre usted. También debe tener en cuenta que utilizamos cookies y tecnologías similares para recopilar y guardar información cuando visita nuestro sitio web, disponible en: www.orcam.com, con el fin de garantizar que le proporcionemos la mejor experiencia posible. Para obtener más información sobre el uso de dichas tecnologías, consulte nuestra Política de cookies en <https://www.orcam.com/en/cookies-policy/>.

Si considera que la siguiente Declaración de privacidad no ha satisfecho una inquietud que tenga en relación con su privacidad, puede ponerse en contacto con nosotros a través de: privacy@orcam.com y háganoslo saber.

Si elige descargar la Aplicación, usar, interactuar, registrarse o proporcionarnos datos en relación con los Servicios, acepta explícitamente el uso de dichos datos conforme a la presente Declaración de privacidad. No puede utilizar los Servicios ni enviarnos ningún dato si no acepta alguno de los términos del presente. Esta Declaración de privacidad no se interpretará en modo alguno como excepción a nuestros Términos de uso o cualquier otro acuerdo alcanzado por y entre OrCam y usted.

Garantía.

El cliente reconoce que, salvo que se indique expresamente en el presente documento, OrCam no hace declaración alguna ni ofrece una garantía al cliente en relación con el producto, sus funciones o cualquiera de las imágenes que produce.

La garantía limitada del producto OrCam (la «garantía limitada») para el usuario final cubre al propietario de un producto OrCam contra defectos en los materiales o de mano de obra en el momento de su compra original, por un periodo de un (1) año y durante cualquier periodo adicional de garantía legal aplicable. Para poder acogerse a esta cobertura, el propietario debe presentar el comprobante original de compra o entrega.

OrCam reparará o reemplazará, bajo su criterio exclusivo, cualquier producto que OrCam determine que está cubierto por esta garantía limitada. OrCam no se hará responsable de las condiciones que surjan como consecuencia de un daño intencionado o del mal uso del producto. El propietario será responsable de los gastos de envío del producto a la ubicación especificada por OrCam.

Esta garantía limitada es la única y exclusiva garantía aplicable a los productos OrCam. Terceras partes no tienen autoridad para asumir ninguna representación, garantía o acuerdo en nombre de OrCam con respecto a los productos OrCam. OrCam no concede ninguna garantía de ningún tipo o naturaleza más allá de lo que se indica expresamente en el presente documento.

En ningún caso será OrCam responsable por daños especiales, colaterales, indirectos, punitivos, incidentales, derivados o ejemplares relacionados con, o que surjan de, la utilización del producto. En ningún caso la responsabilidad de OrCam excederá el precio pagado por el producto.

Sin perjuicio de las disposiciones que limitan la responsabilidad en virtud de este acuerdo, la garantía limitada que se establece en el presente documento no será válida y el propietario reembolsará a OrCam los costos y gastos incurridos en caso de que:

- (i) el producto no se haya utilizado de acuerdo con la documentación del producto y las condiciones de uso u otras instrucciones de funcionamiento escritas proporcionadas por OrCam
- (ii) el producto haya sido objeto de manipulación, uso indebido, negligencia o accidente
- (iii) las etiquetas de identificación del producto o de las piezas se hayan retirado o se haya alterado el producto de otro modo
- (iv) el producto haya sido abierto, modificado, reparado, revisado, mantenido o alterado por alguien que no sea un representante autorizado de OrCam

(v) el producto haya sido combinado con software, hardware u otros equipos no suministrados por OrCam o no aprobados por escrito por un representante autorizado de OrCam

(vi) el producto haya sido dañado intencionalmente o expuesto al agua, al calor o a alto voltaje

(vii) el producto haya sido utilizado por una persona que no ha recibido formación por parte de un instructor autorizado OrCam Trainer™

Cualquier pieza sustituida conforme a lo dispuesto en esta garantía estará cubierta por esta garantía durante el tiempo restante del periodo de garantía original, o durante noventa (90) días a partir de la fecha de la reparación, optando siempre por el periodo más largo.

Para registrar su dispositivo para la garantía, visite el sitio web de registro de la garantía: <https://discover.orcam.com/warranty>.

Si considera que su producto necesita respaldo de garantía, póngase en contacto con support@orcaml.com. Los gastos de envío correrán por su cuenta. No obstante, si se determina que la solicitud de garantía es válida, OrCam pagará todos los gastos de transporte del producto reparado o de sustitución.

ORCAM RECHAZA CUALQUIER Y TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS, COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. ORCAM NO GARANTIZA QUE EL PRODUCTO ESTÉ EXENTO DE FALLOS O DE ERRORES DE PROGRAMACIÓN, QUE FUNCIONARÁ SIN INTERRUPCIÓN, QUE CUALQUIER IMAGEN O SONIDO PRODUCIDOS POR EL PRODUCTO SERÁN PRECISOS NI QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO SERÁ SEGURO Y, POR EL PRESENTE DOCUMENTO, RECHAZA TODAS Y CADA UNA DE LAS RESPONSABILIDADES EN ESE SENTIDO. ESTA SECCIÓN SERÁ DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO EN EL ÁMBITO MÁS AMPLIO PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE.

Política de reembolso.

Puede devolver el dispositivo no dañado para recibir un reembolso, dentro del plazo establecido por la legislación local, o bien como se haya acordado entre usted y OrCam a la fecha de compra. Las tasas de formación no son reembolsables. Para iniciar un proceso de devolución, póngase en contacto con su representante local o el servicio de asistencia de OrCam.

Cuando devuelva el dispositivo OrCam, siga las instrucciones de soporte de OrCam cuidadosamente. El dispositivo debe estar en las mismas condiciones que lo recibió y sin ningún tipo de daño. Su reembolso y la forma en que se emite puede diferir según la forma en que se compró el dispositivo, su condición y el tiempo que lo ha tenido.

OrCam procesará su devolución solo después de que el transportista haya recibido su dispositivo y lo haya entregado a OrCam. Por lo general, OrCam tarda hasta tres semanas en recibir (para los envíos internacionales que implican a las aduanas locales puede tardar más tiempo) y procesar su devolución. Una vez que OrCam

emita su reembolso, puede tardar un tiempo adicional para que su institución financiera ponga a disposición sus fondos en su cuenta. Para los pagos con tarjeta de crédito, puede tardar de 5 a 10 días hábiles.

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el equipo de soporte de OrCam.

Conformidad con FCC.

Este equipo se ha sometido a pruebas que determinan su cumplimiento con los límites para un dispositivo digital de clase B, según la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir esas interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV.
- Este dispositivo cumple con los requisitos especificados en la sección 15 de las normas FCC.

El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia de FCC.

Las modificaciones no aprobadas expresamente por el fabricante podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo bajo las normas de la FCC.

NOTA: EL FABRICANTE NO ES RESPONSABLE DE NINGUNA INTERFERENCIA DE RADIO O TELEVISIÓN CAUSADA POR CAMBIOS O MODIFICACIONES EN EL EQUIPO QUE SE REALICEN SIN AUTORIZACIÓN. DICHAS MODIFICACIONES PODRÍAN ANULAR LA AUTORIDAD DEL USUARIO PARA UTILIZAR EL EQUIPO.



Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Contacte con OrCam para su correcta eliminación.

RoHS

Cumple con la directiva sobre Restricción de ciertas sustancias peligrosas (materiales y componentes)

FC

ID de FCC: 2AAWI-READ

CE

Cumple la normativa CE



Consulte la guía y el manual de instrucciones del usuario

Seguridad y advertencias.

Antes de utilizar el dispositivo OrCam, lea atentamente estas precauciones para evitar situaciones peligrosas y garantizar el funcionamiento óptimo del dispositivo. Maneje su dispositivo OrCam con cuidado. Podría sufrir daños si se cae, quema, perfora o aplasta. No abra la carcasa exterior del dispositivo.

El dispositivo OrCam está diseñado para funcionar en una temperatura ambiente de entre 0°C y 40°C y en condiciones normales (humedad relativa del 10 % al 90 %, y presión atmosférica de hasta 2000 metros sobre el nivel del mar [700 hPa]). El dispositivo podría sufrir daños si se utiliza fuera de este margen. Conserve y transporte el dispositivo en un lugar fresco y seco (0°C a 40°C), con una humedad relativa del 5 % al 90 % y una presión atmosférica de 700 hPa a 1060 hPa. El dispositivo OrCam es resistente al agua, pero no impermeable. Esto significa que el dispositivo puede soportar lluvias ligeras o lloviznas durante períodos cortos de tiempo, aunque no se recomienda. No utilice el dispositivo OrCam en caso de lluvia torrencial, en la playa o en la piscina, ni cerca de una bañera o ducha. No sumerja el dispositivo OrCam en ningún líquido. El dispositivo OrCam cumple con los estándares del Código IP: IP22.

Si tiene un problema al utilizar el dispositivo OrCam, si el maletín está dañado o el lente está agrietado o si cree que hay algún problema con él, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica y no intente repararlo usted mismo. Toda reparación o todo mantenimiento del dispositivo OrCam deben ser realizados exclusivamente por personal especializado de OrCam. Las reparaciones no autorizadas podrían anular la garantía.

No intente sustituir la batería; podría dañarla y provocar su recalentamiento e incluso sufrir lesiones personales. La vida útil de la batería es de dos años de uso normal —una media de un ciclo de carga por día— después de los cuales podría ser necesario cambiarla. Utilice únicamente el cargador suministrado con el dispositivo OrCam. El uso de otro cargador podría anular la garantía y causar lesiones graves.

No fuerce ningún conector en un puerto ni ejerza demasiada presión sobre un botón. Esto podría provocar daños no cubiertos por la garantía. Si la conexión de un conector no se realiza con facilidad, compruebe si hay algo obstruyendo el puerto en cuestión y verifique que se trata del conector correcto para ese puerto. No use el dispositivo con software, hardware u otros equipos no suministrados por OrCam. La exposición del dispositivo a campos magnéticos podría dañar la unidad o borrar sus datos.

Cuando utilice el dispositivo OrCam o cargue la batería, es normal que el dispositivo se caliente. Si el dispositivo se calienta demasiado, tiene alguna fuga o emite olor a quemado, apáguelo de inmediato y póngase en contacto con el servicio de asistencia de OrCam.

Si tiene preguntas específicas sobre el uso junto con un marcapasos o desfibrilador interno, consulte a su médico. No utilice el dispositivo OrCam para leer etiquetado de medicamentos.

Limpieza.

Limpie el dispositivo si le parece sucio o si se transfiere entre usuarios. Jamás toque el objetivo de la cámara con el dedo. Limpie la lente únicamente con el paño de microfibra y el líquido específico para limpiar lentes que se suministran. No use ningún material abrasivo. No exponga el dispositivo a productos químicos, por ejemplo productos de limpieza del hogar, aerosoles, disolventes, alcohol o amoníaco. Si nota una reacción alérgica a cualquiera de los elementos del dispositivo OrCam, acuda a un profesional médico.

Máxima salida de radiación láser: 0,371 mW
Longitud de onda emitida: 635 nm
Nombre de la norma: IEC 60825-1

